

Introduzione

Questo test ricerca la presenza di sostanze da abuso. Si prega di verificare il codice abbreviato stampato sulla bustina d'alluminio e sul dispositivo test stesso (per es. COG, THC, KET ecc.) e quindi fare riferimento alla tabella sul retro, dove troverete i nomi scientifici e quelli correnti delle droghe, e i tempi approssimativi per la loro identificazione. Si prega di notare che le metanfetamine sono parte della famiglia delle droghe anfetaminiche e quindi normalmente il test risulterà positivo per l'Ecstasy (E). Si tratta di un test rapido, preciso e molto facile da eseguire.

Droghe negli ambienti di lavoro

Le droghe possono avere svariati effetti sul cervello e sul fisico, e possono influenzare la performance lavorativa dei dipendenti anche se l'abuso di droga avviene fuori dall'ambiente di lavoro. Come datore di lavoro, avete il dovere di assicurarvi, per quanto sia ragionevolmente possibile, che i vostri impiegati non costituiscano un pericolo per altri impiegati o per il pubblico a causa del consumo di sostanze da abuso.

Aspetti legali

Se come datore di lavoro desiderate testare i vostri dipendenti per sostanze da abuso, è importante che istituiate una politica specifica, avvertendo il vostro personale che potrà essere sottoposto a controlli casuali per la droga, e che l'utilizzo di droghe sul luogo di lavoro o l'essere sotto l'influsso di droghe sul luogo di lavoro sono infrazioni che possono causare il licenziamento. È altresì importante che vi teniate aggiornati sulle più recenti normative in merito.

Se uno dei vostri impiegati avesse problemi di droga, dovrete fare tutto il possibile per aiutarlo/a, e incoraggiarlo/a a farsi aiutare da un professionista. Se l'abuso di droga fosse un problema comune nella vostra azienda, potrebbe essere nel vostro interesse iniziare un programma di sensibilizzazione al problema della droga mirato al personale e ai dirigenti.

Contenuto della confezione

Bustina d'alluminio contenente il dispositivo test per la droga
Istruzioni complete

Quando posso effettuare il test?

Questo test può essere effettuato in qualsiasi momento.

Quanto tempo ci vuole prima che si possa leggere il risultato?

I risultati possono essere letti nel giro di 5 minuti.

Avvertenze

1. Questo test è solo per uso esterno.
2. Non utilizzare il test oltre la data di scadenza indicata sulla bustina d'alluminio.
3. Utilizzare un test nuovo per ciascun campione di urina, per evitare risultati fasulli.
4. Non utilizzare il dispositivo test se la bustina d'alluminio è stata aperta.

Quanto è preciso il test?

Questo test è molto preciso, e i suoi livelli di sensibilità soddisfano gli standard SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) e i livelli consigliati dal National Institute on Drug Abuse (NIDA) negli USA.

Esiste comunque la possibilità di risultati fasulli a causa dell'interferenza di altre sostanze presenti nell'urina.

Una delle sostanze più comuni che causano risultati falsi positivi è la codeina, contenuta in diversi analgesici acquistabili senza ricetta medica. Questi analgesici produrranno un risultato positivo per il test sugli oppiacei/morfina. Si consiglia di chiedere alle persone che si sottopongono al test se sono in cura con farmaci, prima di eseguire il test.

Strisce e pannelli per test per droga



Fig.1
Test per droga singola con striscia



Fig.2
Test per droga singola con pannello



Fig.3
Test multi-droga con pannello

Per la natura sensibile di questo test per la droga, dovrete fare attenzione nell'eseguire il test per evitare contaminazioni, risultanti in risultati del test imprecisi. Si prega di leggere con attenzione queste istruzioni prima di iniziare il test.

Procedura del test

1. Estrarre il dispositivo test dalla bustina d'alluminio (non rompete il sigillo della bustina d'alluminio fino a che non siete pronti per iniziare il test).
2. Utilizzando un contenitore di plastica, ottenere un campione di urina dalla persona che si sottopone al test.
3. Se utilizzate un test con pannello (come nella fig. 2 e nella fig. 3 sopra), strappate il cappuccio protettivo dall'estremità del pannello test per mettere a nudo la/le striscia/strisce test assorbente/i.
4. Immergete con cura l'estremità del dispositivo test con le linee ondulate nel campione di urina, facendo attenzione a che l'urina NON vada al di sopra della linea MAX. Nei test con striscia (vedi fig. 1 sopra), tale linea si trova subito sopra le linee ondulate; nei test con pannello, assicurarsi che l'urina non venga a contatto con l'involucro di plastica.
5. Lasciate che il dispositivo test assorba l'urina per circa 10-15 secondi.
6. Rimuovere il dispositivo test dall'urina, posizionare la striscia test su una superficie piana e pulita mentre le linee test si sviluppano.
7. Potrete leggere i risultati negativi non appena compaiono, ma i risultati positivi devono essere letti almeno 5 minuti dopo che la striscia è stata rimossa dall'urina. Tutti i risultati devono essere letti entro 10 minuti, altrimenti si possono ottenere letture false.

Introduzione

Questo test ricerca la presenza di sostanze da abuso. Si prega di verificare il codice abbreviato stampato sulla bustina d'alluminio e sul dispositivo test stesso (per es. COG, THC, KET ecc.) e quindi fare riferimento alla tabella sul retro, dove troverete i nomi scientifici e quelli correnti delle droghe, e i tempi approssimativi per la loro identificazione. Si prega di notare che le metanfetamine sono parte della famiglia delle droghe anfetaminiche e quindi normalmente il test risulterà positivo per l'Ecstasy (E). Si tratta di un test rapido, preciso e molto facile da eseguire.

Droghe negli ambienti di lavoro

Le droghe possono avere svariati effetti sul cervello e sul fisico, e possono influenzare la performance lavorativa dei dipendenti anche se l'abuso di droga avviene fuori dall'ambiente di lavoro. Come datore di lavoro, avete il dovere di assicurarvi, per quanto sia ragionevolmente possibile, che i vostri impiegati non costituiscano un pericolo per altri impiegati o per il pubblico a causa del consumo di sostanze da abuso.

Aspetti legali

Se come datore di lavoro desiderate testare i vostri dipendenti per sostanze da abuso, è importante che istituiate una politica specifica, avvertendo il vostro personale che potrà essere sottoposto a controlli casuali per la droga, e che l'utilizzo di droghe sul luogo di lavoro o l'essere sotto l'influsso di droghe sul luogo di lavoro sono infrazioni che possono causare il licenziamento. È altresì importante che vi teniate aggiornati sulle più recenti normative in merito.

Se uno dei vostri impiegati avesse problemi di droga, dovrete fare tutto il possibile per aiutarlo/a, e incoraggiarlo/a a farsi aiutare da un professionista. Se l'abuso di droga fosse un problema comune nella vostra azienda, potrebbe essere nel vostro interesse iniziare un programma di sensibilizzazione al problema della droga mirato al personale e ai dirigenti.

Contenuto della confezione

Bustina d'alluminio contenente il dispositivo test per la droga
Istruzioni complete

Quando posso effettuare il test?

Questo test può essere effettuato in qualsiasi momento.

Quanto tempo ci vuole prima che si possa leggere il risultato?

I risultati possono essere letti nel giro di 5 minuti.

Avvertenze

1. Questo test è solo per uso esterno.
2. Non utilizzare il test oltre la data di scadenza indicata sulla bustina d'alluminio.
3. Utilizzare un test nuovo per ciascun campione di urina, per evitare risultati fasulli.
4. Non utilizzare il dispositivo test se la bustina d'alluminio è stata aperta.

Quanto è preciso il test?

Questo test è molto preciso, e i suoi livelli di sensibilità soddisfano gli standard SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) e i livelli consigliati dal National Institute on Drug Abuse (NIDA) negli USA.

Esiste comunque la possibilità di risultati fasulli a causa dell'interferenza di altre sostanze presenti nell'urina.

Una delle sostanze più comuni che causano risultati falsi positivi è la codeina, contenuta in diversi analgesici acquistabili senza ricetta medica. Questi analgesici produrranno un risultato positivo per il test sugli oppiacei/morfina. Si consiglia di chiedere alle persone che si sottopongono al test se sono in cura con farmaci, prima di eseguire il test.

Strisce e pannelli per test per droga



Fig.1
Test per droga singola con striscia



Fig.2
Test per droga singola con pannello




Fig.3
Test multi-droga con pannello

Per la natura sensibile di questo test per la droga, dovrete fare attenzione nell'eseguire il test per evitare contaminazioni, risultanti in risultati del test imprecisi. Si prega di leggere con attenzione queste istruzioni prima di iniziare il test.

Procedura del test

1. Estrarre il dispositivo test dalla bustina d'alluminio (non rompete il sigillo della bustina d'alluminio fino a che non siete pronti per iniziare il test).
2. Utilizzando un contenitore di plastica, ottenere un campione di urina dalla persona che si sottopone al test.
3. Se utilizzate un test con pannello (come nella fig. 2 e nella fig. 3 sopra), strappate il cappuccio protettivo dall'estremità del pannello test per mettere a nudo la/le striscia/strisce test assorbente/i.
4. Immergete con cura l'estremità del dispositivo test con le linee ondulate nel campione di urina, facendo attenzione a che l'urina NON vada al di sopra della linea MAX. Nei test con striscia (vedi fig. 1 sopra), tale linea si trova subito sopra le linee ondulate; nei test con pannello, assicurarsi che l'urina non venga a contatto con l'involucro di plastica.
5. Lasciate che il dispositivo test assorba l'urina per circa 10-15 secondi.
6. Rimuovere il dispositivo test dall'urina, posizionare la striscia test su una superficie piana e pulita mentre le linee test si sviluppano.
7. Potrete leggere i risultati negativi non appena compaiono, ma i risultati positivi devono essere letti almeno 5 minuti dopo che la striscia è stata rimossa dall'urina. Tutti i risultati devono essere letti entro 10 minuti, altrimenti si possono ottenere letture false.

Risultati
Leggere i risultati di ciascuna striscia individualmente e in maniera autonoma rispetto alle altre. Osservando il dispositivo test, si noterà una linea colorata rosa/rossa all'estremità superiore della finestra test. Si tratta della linea di controllo (C). La linea successiva, che può apparire o non apparire al di sotto della linea C, viene definita linea test (T).

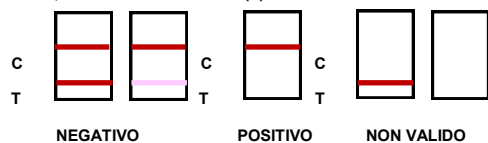

La linea di controllo C deve essere presente, in quanto conferma che il dispositivo test ha funzionato regolarmente. Se non compare la linea di controllo, significa che il dispositivo test non ha funzionato regolarmente e dovrete effettuare un altro test. Una seconda linea rosa/rossa sotto la linea di controllo, per quanto leggera, dovrebbe ora apparire. Questo significa che il risultato è negativo. Se invece non appare alcuna linea sotto la linea di controllo, questo significa che la persona sottoposta al test risulta positiva per quella sostanza da abuso.

L'intensità del colore della linea test (T) non è rilevante; se appare una QUALSIASI seconda linea (anche leggera) significa che il test è negativo

TABELLA DELLE DROGHE

Sigla indicata sul test	Soglia del test (ng/mL)	Nome scientifico	Altri nomi	Presenza rilevabile nell'organismo per circa
6-MAM	10	6-MONOACETILMORFINA	EROINA, ERO, SMACK	2-8 ore
AMP	1000	ANFETAMINE	SPEED, PEP-PILL, METH	2-6 giorni
BUP	10	BUPRENORFINA	SUBUTEX	3-6 giorni
BZO	300	BENZODIAZEPINE	BENNIES, BENZO	2-14 giorni
CFYL	500	CARFENTANIL	WILDNIL	2-5 giorni
COC	100 (strisce) 300 (pannelli)	COCAINA	COCA, CRACK, NEVE, ROCK	2-5 giorni
COT	200	COTININA	NICOTINA	2-5 giorni
EDDP	300	EDDP / METADONE	DOLLY, RED ROCK	2-4 giorni
FYL	20	FENTANIL	APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8	2-5 giorni
K2	50	CANNABIS SINTETICA	BLACK MAMBA, INDICA, JOINT, JUNK, SPICE	1-3 giorni
KET	1000	KETAMINA	VALIUM PER GATTO	2-5 giorni
LSD	20	ACIDO LISERGICO DIETILAMMIDE	ACIDO, TABS	1-2 giorni
MDMA	500	Metilendiossinaetanfetamine	ECSTASY, E, VETRO, CHICCA	2-6 giorni
MET	1000	METANFETAMINE	ICE, GLASS	2-6 giorni
MOP/MOR	300	MORFINA	OPPIACEI	2-5 giorni
OPI	2000	OPPIACEI	EROINA, ERO, SMACK	2-5 giorni
THC	20 (strisce) 50 (pannelli)	CANNABIS	MARIJUANA, SPLIFF, SINSE, HASH	Uso saltuario 2-14 giorni ; Uso pesante 30 giorni.
TML	100	TRAMADOL	TRAMAL, ULTRAM	1-3 giorni

Fare riferimento alla tabella delle droghe riportata sotto per determinare a quali sostanze corrispondono le sigle abbreviate. Per esempio, la sigla "THC" indica la cannabis. Si prega di notare che il test per la droga che avete acquistato non è valido per tutte le droghe sotto elencate; verificare la sigle/le sigle sul test per vedere quali droghe possono essere individuate mediante il test stesso.


Cosa devo fare con i risultati?
 Se otterrete un risultato negativo, nessuna delle sostanze da abuso testate risulta in quel momento presente nell'organismo della persona che è stata sottoposta al test. Si può valutare di effettuare un nuovo test dopo un mese. Se otterrete un risultato positivo per uno dei test per droga, significa che la droga in questione è stata individuata nell'urina. Si raccomanda vivamente di inviare il campione per un test di conferma.

Conservazione
 Questo dispositivo test deve essere conservato a una temperatura compresa fra 2°-30°C. Non congelare. Prima di eseguire il test si prega di portare il dispositivo a temperatura ambiente.

Per maggiori dettagli:

Home Health (U.K.) Ltd
 01923 711511
 www.homehealth-uk.com
 info@homehealth-uk.com

Risultati
Leggere i risultati di ciascuna striscia individualmente e in maniera autonoma rispetto alle altre. Osservando il dispositivo test, si noterà una linea colorata rosa/rossa all'estremità superiore della finestra test. Si tratta della linea di controllo (C). La linea successiva, che può apparire o non apparire al di sotto della linea C, viene definita linea test (T).

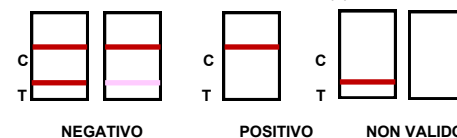

La linea di controllo C deve essere presente, in quanto conferma che il dispositivo test ha funzionato regolarmente. Se non compare la linea di controllo, significa che il dispositivo test non ha funzionato regolarmente e dovrete effettuare un altro test. Una seconda linea rosa/rossa sotto la linea di controllo, per quanto leggera, dovrebbe ora apparire. Questo significa che il risultato è negativo. Se invece non appare alcuna linea sotto la linea di controllo, questo significa che la persona sottoposta al test risulta positiva per quella sostanza da abuso.

L'intensità del colore della linea test (T) non è rilevante; se appare una QUALSIASI seconda linea (anche leggera) significa che il test è negativo

TABELLA DELLE DROGHE

Sigla indicata sul test	Soglia del test (ng/mL)	Nome scientifico	Altri nomi	Presenza rilevabile nell'organismo per circa
6-MAM	10	6-MONOACETILMORFINA	EROINA, ERO, SMACK	2-8 ore
AMP	1000	ANFETAMINE	SPEED, PEP-PILL, METH	2-6 giorni
BUP	10	BUPRENORFINA	SUBUTEX	3-6 giorni
BZO	300	BENZODIAZEPINE	BENNIES, BENZO	2-14 giorni
CFYL	500	CARFENTANIL	WILDNIL	2-5 giorni
COC	100 (strisce) 300 (pannelli)	COCAINA	COCA, CRACK, NEVE, ROCK	2-5 giorni
COT	200	COTININA	NICOTINA	2-5 giorni
EDDP	300	EDDP / METADONE	DOLLY, RED ROCK	2-4 giorni
FYL	20	FENTANIL	APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8	2-5 giorni
K2	50	CANNABIS SINTETICA	BLACK MAMBA, INDICA, JOINT, JUNK, SPICE	1-3 giorni
KET	1000	KETAMINA	VALIUM PER GATTO	2-5 giorni
LSD	20	ACIDO LISERGICO DIETILAMMIDE	ACIDO, TABS	1-2 giorni
MDMA	500	Metilendiossinaetanfetamine	ECSTASY, E, VETRO, CHICCA	2-6 giorni
MET	1000	METANFETAMINE	ICE, GLASS	2-6 giorni
MOP/MOR	300	MORFINA	OPPIACEI	2-5 giorni
OPI	2000	OPPIACEI	EROINA, ERO, SMACK	2-5 giorni
THC	20 (strisce) 50 (pannelli)	CANNABIS	MARIJUANA, SPLIFF, SINSE, HASH	Uso saltuario 2-14 giorni ; Uso pesante 30 giorni.
TML	100	TRAMADOL	TRAMAL, ULTRAM	1-3 giorni

Fare riferimento alla tabella delle droghe riportata sotto per determinare a quali sostanze corrispondono le sigle abbreviate. Per esempio, la sigla "THC" indica la cannabis. Si prega di notare che il test per la droga che avete acquistato non è valido per tutte le droghe sotto elencate; verificare la sigle/le sigle sul test per vedere quali droghe possono essere individuate mediante il test stesso.

Cosa devo fare con i risultati?
 Se otterrete un risultato negativo, nessuna delle sostanze da abuso testate risulta in quel momento presente nell'organismo della persona che è stata sottoposta al test. Si può valutare di effettuare un nuovo test dopo un mese. Se otterrete un risultato positivo per uno dei test per droga, significa che la droga in questione è stata individuata nell'urina. Si raccomanda vivamente di inviare il campione per un test di conferma.

Conservazione
 Questo dispositivo test deve essere conservato a una temperatura compresa fra 2°-30°C. Non congelare. Prima di eseguire il test si prega di portare il dispositivo a temperatura ambiente.

Per maggiori dettagli:

Home Health (U.K.) Ltd
 01923 711511
 www.homehealth-uk.com
 info@homehealth-uk.com